




Acro Strep A Dipstick

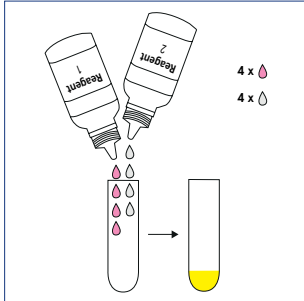


1 Tilsæt 4 fulde dråber rød reagens 1 til ekstraktions røret efterfulgt af 4 fulde dråber farveløst reagens 2. Bland opløsningen ved at svinge ekstraktions røret forsigtigt. Farven på opløsningen skifter til gul.

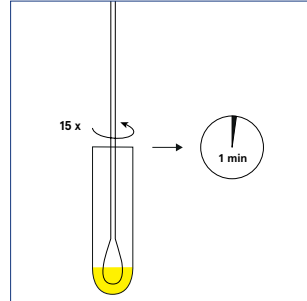

2 Anbring hals podelipinden i ekstraktionens røret. Bevæg hals podelipinden kraftigt rundt 15 gange og efterlad den i ekstraktionen røret i 1 minut.

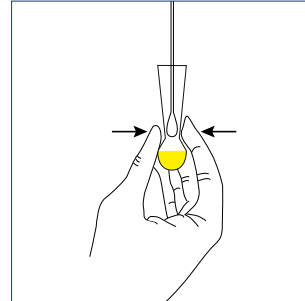


3 Pres hals podelipinden mod indersiden af røret og klem på røret mens hals podelipinden fjernes og det meste af væsken forbliver i røret. Kassér hals podelipinden.

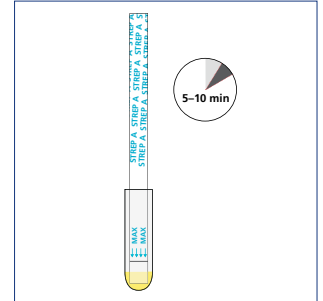


4 Med pilene pegende ned, placer dipstick i røret og start timeren. Aflæs resultatet efter 5 minutter. Resultatet kan ikke fortolkes efter henstand i 10 minutter.


Fortolkning af resultaterne

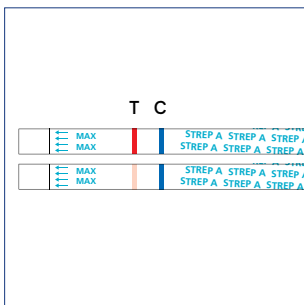

Positivt resultat
To linjer vises. En blå linje vises i kontrol linje region (C) og en rød linje vises i testlinje region (T).

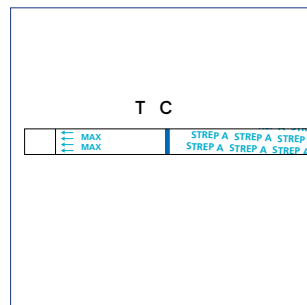

Negativt resultat
En blå linje vises i kontrollinje region (C). Ingen linje vises på testlinje region (T).

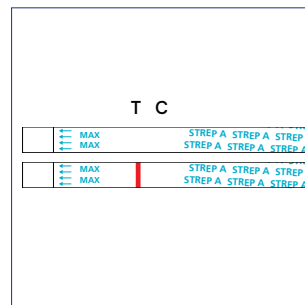

Ugyldigt resultat
Kontrollinje (C) fejler og udebliver. Gennemgå proceduren og gentag testen med en ny test. Hvis problemet fortsætter, afbryd brugen af testkittet og kontakt Aidian's repræsentant.

Læs venligst brugsvejledningen inden testen udføres.

Acro Strep A Dipstick

Kun til professionel *in vitro*- diagnostisk brug

Prøveindsamling og håndtering

- Tag halspodningen med den sterile vatpind, der følger med i sættet. Transport pude pinde indeholdende modificerede Sturat's eller Amies-medium kan også bruges.
- Udfør testen umiddelbart efter prøveopsamling. Halspode prøven kan opbevares i en ren, tør beholder op til 8 timer ved stuetemperatur eller 72 timer ved 2-8 °C.

Hurtig Dipstick test til påvisning af Strep A-antigen

- *Streptococcus pyogenes*, også kaldet Strep A eller GAS, er en betydelig årsag til faryngitis. Streptokokk faryngitis og er ofte vanskelig at skelne fra viral infektion¹, og hurtig testen er en hastig, kosteffektiv og nøjagtig måde at påvise Strep A- infektioner. Acro Strep A dipstick er en kvalitativ lateral flow immunoassay test til påvisning af Strep A-antigener ved halspodning. Resultaterne er tilgængelig på mindre end 10 minutter.

Let at bruge

- Enkel testprocedure
- Klare farvereaktioner til let resultat tolkning

Pålidelig og hurtig

- Pålidelige resultater på mindre end 10 minutter
- Positive og negative kontroller inkluderet
- Intern kontrol sikrer korrekt testfunktion

Reference:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Canadian Family Physician 2018; 64, 832-840.



Kontakt information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 86103020

www.aidian.dk

Produkt	Produkt nr.	Vare nr.
Acro Strep A Dipstick, 50 tests	6404159	154582