


V-Monovette® Urin / Urine / Urina / Orina / Urina / Moč / Moczu / Mocz / моча / Idrar

V-Monovette® Urin mit Stabilisator / Urine with stabiliser / Urine avec stabilisateur / Urine avec stabilisateur / Urina con stabilizzatore / Orina con estabilizador / Urina com estabilizador / Urine met stabilisator / Moč se stabilizátorem / Moczu so stabilizátorem / Mocz ze stabilizatorem / моча со стабилизатором / Idrar stabilizer

Gebrauchshinweis · Instructions for Use · Mode d'emploi · Istruzioni d'uso · Instrucciones de uso · Instruções de uso · Gebruiksaanwijzing · Návod k použití · Návod na použitie
Instrukcja użytkowania · Инструкция по использованию · Kullanma Kılavuzu

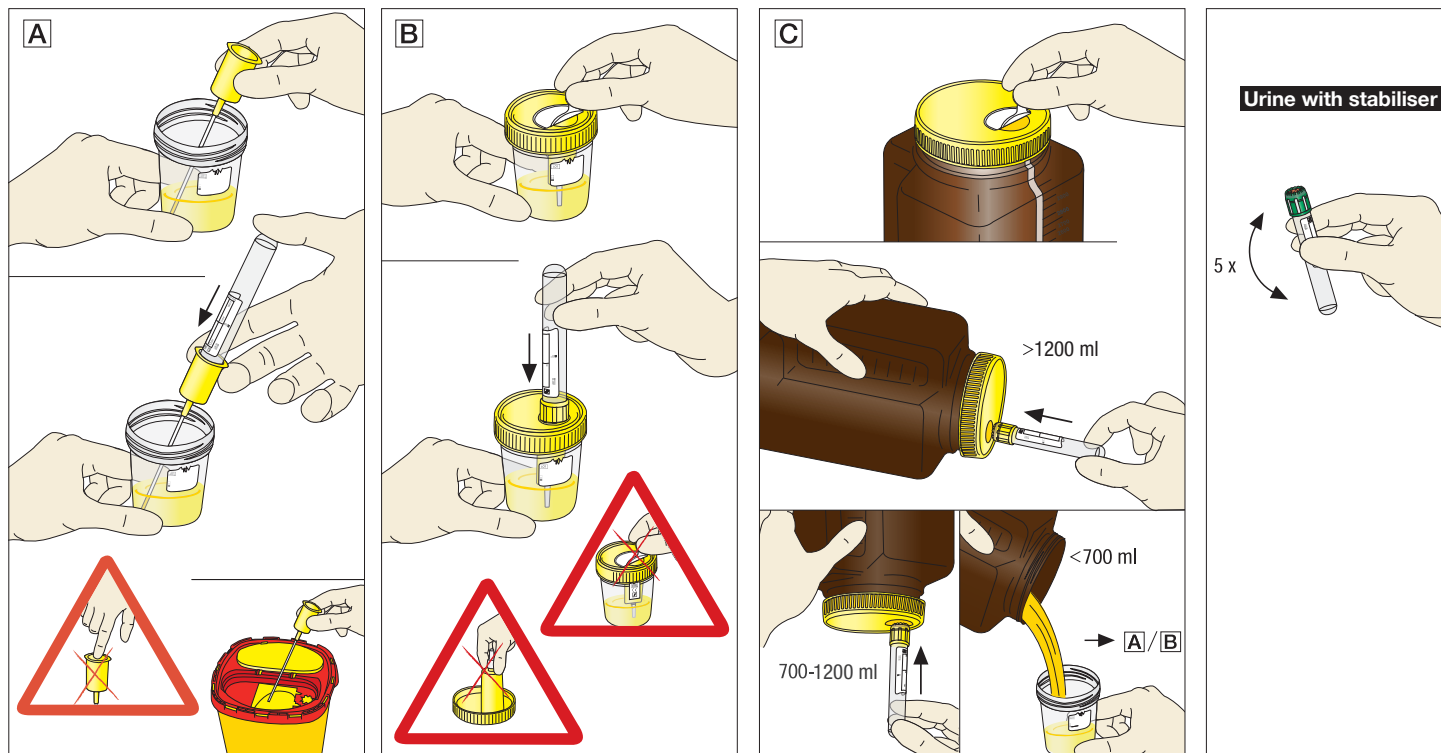

Technische Änderungen vorbehalten · Technical modifications reserved · Sous réserve de modifications techniques · Con riserva di modifiche tecniche · Modificaciones técnicas reservadas · Modificações técnicas reservadas · Technische wijzigingen onder voorbehoud · Technické změny vyhrazeny · Technické zmeny vyhradené · Zmiany techniczne zastrzeżone · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений без дополнительного извещения · Teknik değışiklik hakları saklıdır
Lagern bei Raumtemperatur · Store at room temperature · Stocker à température ambiante · Conservare a temperatura ambiente · Almacenar a temperatura ambiente · Armazenamento à temperatura ambiente · Opslag bij kamertemperatuur
Skladovat při pokojové teplotě · Skladovat pri izbovej teplote · Przechowywać w temperaturze pokojowej · Хранить при комнатной температуре · Oda Temperaturunda muhavaza ediniz

Bei Wiederverwendung: Kontaminationsgefahr · In case of re-use: risk of contamination · En cas de réutilisation: risque de contamination · In caso di riutilizzo: rischio di contaminazione · En caso de reutilización: riesgo de contaminación
Em caso de reutilização: risco de contaminação · In geval van hergebruik: kans op besmetting · V prípade opätovného použitia: riziko kontaminácie · V prípade opätovného použitia: hrozí riziko kontaminácie
W przypadku ponownego użycia: ryzyko zakażenia · В случае повторного использования: риск заражения · Tekrar kullanim durumunda: kontaminasyon riski



ПУНФЗС 2009/04699 от 18.10.2017

- DE** V-Monovette® Urin mit Stabilisator nach der Probennahme ca. 5 x schwenken. Stabilisierung von Mikroorganismen bei Raumtemperatur für bis zu 48 h.
- EN** When using the V-Monovette® Urine with stabiliser mix gently after sample collection (approx. 5 times). Stabilisation of microorganisms at room temperature for up to 48 hours.
- FR** Lors de l'utilisation de la V-Monovette® Urine avec stabilisateur, mélanger doucement (environ 5 fois) après le prélèvement d'échantillon. Stabilisation des micro organismes à température ambiante jusqu'à 48 heures.
- IT** Nel caso si utilizzi la V-Monovette® per Urina con stabilizzatore miscelare adeguatamente dopo la raccolta del campione (almeno 5 volte). La stabilizzazione dei microorganismi è garantita, a temperatura ambiente, fino a 48 ore.
- ES** Agitar suavemente la V-Monovette® de orina con estabilizador tras la toma de la muestra (aprox. 5 veces). Estabilización de microorganismos durante 48h a temperatura ambiente.
- PT** Na utilização da V-Monovette® de Urina com estabilizador, após a colheita da amostra homogeneizar suavemente (aprox. 5 vezes). Estabilização de microorganismos à temperatura ambiente até 48 horas.
- NL** Bij het gebruik van het V-Monovette® Urine met stabilisator zachtjes mengen na het verzamelen van monsters (ongeveer 5 keer). Stabilisatie van micro-organismen bij kamertemperatuur gedurende 48 uur.
- CS** Při odběru do V-Monovette® moč se stabilizátorem a jejím promíchání se vzorkem (přibližně 5krát). Stabilizace mikroorganismů při pokojové teplotě po dobu až 48 hodin.
- SK** Pri používaní V-Monovette® moczu so stabilizátorem je potrebné odobrať aspoň 5 vzoriek. Stabilizácia mikroorganizmov pri izbovej teplote je po dobu až 48 hodín.
- PL** W wypadku używania V-Monovette® mocz ze stabilizatorem należy delikatnie wymieszać próbkę (około 5 razy). Stabilizacja mikroorganizmów w temperaturze pokojowej przez 48 godzin.
- RU** После взятия образца в V-Monovette® моча со стабилизатором, осторожно перемешайте пробу (до 5 раз). При комнатной температуре микроорганизмы стабильны в течение 48 часов.
- TR** V-Monovette® idrar stabilizer tıpünü kullanırken örnek toplama işleminden sonra hafifçe karıştırın (yaklaşık 5 kez). Mikroorganizmaların 48 saat boyunca oda sıcaklığında stabilizasyonu.