

På høje tid at udskifte synstavlen!

Sundhedstyrelsen siger LogMAR - og væk med Østerberg og andre misvisende tavler!

Synstests på synstavler skal fremadrettet kunne aflæses, registreres og indberettes med logaritmiske værdier (LogMAR) og ikke 6/6 eller decimalværdier.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer til opbygning af synstavler og aflæsning:

De 3-6 årige:

Tavlen skal være kalibreret til synstest på 3 meters afstand.

Tavlen er udstyret med figurer (ikke udfyldte symboler som Østerberg) eller simple bogstavstavler (HOTV eller E).

På hver linje er op til 5 symboler, men præcis 5 symboler er et krav fra LogMAR 0.5 linjen (3/6) og ned.

På hver linje skal afstanden mellem symboler = symbolhøjden.

Afstanden mellem linjer = symbolhøjden på ovenstående linje.

Symbolerne på hele tavlen danne således en omvendt pyramide med stadig kortere linjer.

Skolebørn og voksne:

Samme krav som ved de 3-6 årige.

Dog tillades tavler kalibreret til syntest på mellem 3 og 6 meter. Symboler på tavlerne er figurer, bogstaver eller tal.

Overgang til logaritmisk skala (LogMAR)

Med overgang til aflæsning med logaritmisk skala (LogMAR) er grænseværdien 6/9 fortsat udgangspunktet for visitation for henvisning til øjenlæge, men angives nu med en logaritmisk værdi for at opnå et mere nøjagtigt og sammenligneligt synsprøveresultat.


Opbygning af tavlen

Synstavler med logaritmisk skala inddeles med symbollinjer af bogstaver eller figurer hvis størrelsen falder med præcis 0.1 LogMAR pr. linje ned over tavlen. (Normalsynet på den logaritmiske skala = 0.0)

Værdien 6/9 på en 6 meter tavle ligesom værdien 3/4.5 på en 3 meter tavle angives logaritmisk 0,18, men da tavlerne opbygges med spring på 0.1 LogMAR er nærmeste aflæsningsværdi LogMAR 0.2

Grænseværdien der skal anvendes som rettesnor for henvisning til øjenlæge på en LogMar opbygget tavle bliver således LogMAR 0.2 – eller højere.

NB: jo højere LogMAR værdi – jo dårligere syn.

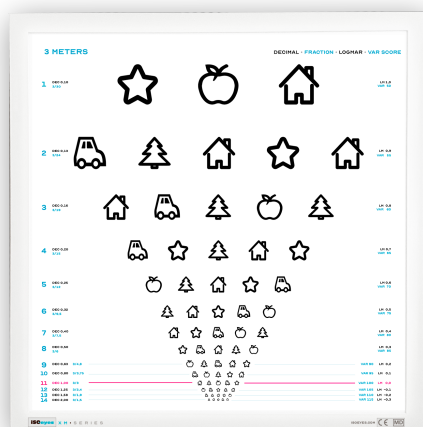

ISOeyes leverer også nye tavlefronter til flere af de gamle synstavleklasse. Spørg din foretrukne forhandler eller kontakt ISOeyes.



Tavler fra ISOeyes der matcher Sundhedsstyrelsens nye krav!

Her til venstre blot et par af danske ISOeyes's tavler.

Alle tavler fra ISOeyes lever til fulde op til Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer og mere til, og letter overgangen ved også at indeholde såvel brøk som decimalværdierne.

Tavlerne er CE/MD godkendte og overholder tillige som en af de meget få - alle foreskrifter i den internationalt vedtagne ISO 8596 standard for opbygning af synstavler, som også Danmark har tilsluttet sig.

ISOeyes tilbyder energibesparende LED tavler med fjernbetjening i 4 størrelser og understøtter alle synsprøve-afstande mellem 2.5 meter og 6 meter, så du kan få præcis den tavleafstand som dit klinikrum dikterer. Endvidere tilbydes en bred vifte af optotypes (symboler på tavlerne) således at alle testmiljøer for voksne, førskole- og skolebørn, analfabeter m.fl. understøttes.